

ZEUGENOL

Zinc Oxide Eugenol Impression Paste / Pasta per impronte all'ossido di zinco eugenolo
TECHNICAL & SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE / ISTRUZIONI D'USO TECNICHE E DI SICUREZZA



Product Details: - ZEUGENOL is an impression material which is the combination of zinc oxide and Eugenol (contained cloves'oil). An acid-base reaction takes place with the formation of zinc eugenolate chelate. Paste is very easy to mix, having right flow characteristics, dimensionally stable with appropriate setting time.

Dettagli del prodotto: - ZEUGENOL è un materiale da impronta che è la combinazione di ossido di zinco ed eugenolo (olio di chiodi di garofano). Avviene una reazione acido-base con formazione di chelato di eugenolato di zinco. La pasta è molto facile da miscelare, ha le giuste caratteristiche di flusso, dimensionalmente stabile con un tempo di presa appropriato.

Application :- Used for taking impressions of toothless jaws in individual impression trays for making removable full dentures, to enable mal-fitting dentures to be relined and also for temporary fixations of crowns, bridges and pin teeth.

Applicazioni: - Utilizzato per la presa di impronte di arcate edentule in portaimpronte individuali per la realizzazione di protesi totali rimovibili, per consentire la ribasatura di protesi mal adattate e anche per fissaggi temporanei di corone, ponti e denti a spillo.

Composition:- Base paste: Zinc Oxide, petroleum jelly, Resin & Excipients. Catalyst Paste: Eugenol, petroleum jelly, Color & Excipients.

Composizione: - Base: ossido di zinco, vaselina, resina ed eccipienti. Pasta catalizzatrice: eugenolo, vaselina, coloranti ed eccipienti.

Disclaimer:- The material has been developed solely for professional dental use. Application should be carried out strictly according to the instruction for use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the instruction of the stipulated area of applications. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in this instruction sheet. Description and data constitute no warranty of attributes and are not binding.

Disclaimer:- Il materiale è stato sviluppato esclusivamente per uso odontoiatrico professionale. L'applicazione deve essere eseguita rigorosamente secondo le istruzioni per l'uso. Non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni dell'area di applicazione prevista. L'utente è responsabile di testare il materiale per verificarne l'idoneità e l'utilizzo per qualsiasi scopo non esplicitamente indicato in questo foglio di istruzioni. La descrizione e i dati non costituiscono alcuna garanzia di attributi e non sono vincolanti.

Use & Seek Medical Attention: It should not be used with patients who have a history of severe allergic reaction to any of the components.

Utilizzo e consulto medico: Non deve essere utilizzato su pazienti che hanno una storia di grave reazione allergica a uno qualsiasi dei componenti.

Warning: Avoid prolonged or repeated contact with skin (allergic contact dermatitis), and eyes. Avoid prolonged inhalation. Do not take it internally. Contact with the skin may cause irritation, burns of hypersensitivity. If contact with skin occurs immediately wipe off thoroughly with cotton and alcohol and then wash well with soap and water. If skin rash and sensitization or other allergic reaction occurs discontinue use and seek medical attention. If the product comes into contact with the eyes, rinse thoroughly with fresh water and consult a physician. It should not be used with patients who have a history of severe allergic reaction to any of the components.


Avvertenze: Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle (dermatite allergica da contatto) e con gli occhi. Evitare l'inalazione prolungata. Non assumerlo internamente. Il contatto con la pelle può causare irritazione, ustioni o ipersensibilità. In caso di contatto con la pelle, pulire immediatamente accuratamente con cotone e alcool e poi lavare bene con acqua e sapone. In caso di eruzione cutanea e sensibilizzazione o altra reazione allergica, interrompere l'uso e consultare un medico. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua dolce e consultare un medico. Non deve essere usato con pazienti che hanno una storia di grave reazione allergica a uno qualsiasi dei componenti.








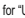
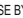


Presentation : Ref. ZEUGENOL 1 x 120 g, Base, 1 x 100 g Catalyst, Plastic Tube, 1- Mixing pad.

Presentatione: Ref. ZEUGENOL 1 x 120 g, Base, 1 x 100 g Catalizzatore, Tubo di plastica, 1- Mixing pad.

Shelf Life: 3 Years from date of manufacturing.

Scadenza: 3 anni dalla data di produzione.

 **Manufactured by/Prodotto da:**
RAM MEDICAL SRL
Via R. Sanzio SNC
56033 – Capannoli (PI) – Italy
info@rammedical.it – www.rammedical.it

 Symbol for "BATCH CODE"  Symbol for "USE BY"  Symbol for "NON STERILE"  Symbol for "KEEP DRY"  Symbol for "KEEP AWAY FROM SUNLIGHT"  Symbol for "KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN"  Symbol for "MANUFACTURER NAME & ADDRESS"  Symbol for "CONSULT INSTRUCTION FOR USE"  Symbol for "CATALOGUE NUMBER"  Symbol for "DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED"  Symbol for "TEMPERATURE LIMITATION"

The material has been developed solely for professional dental use. Application should be carried out strictly according to the instruction for use. Liability cannot be accepted for damages resulting from failure to observe the instructions of the stipulated area of applications. The user is responsible for testing the material for its suitability and use for any purpose not explicitly stated in this instruction sheet. Description and data constitute no warranty of attributes and are not binding.